

EM RESUMO PORTUGUÊS

exocad



ATUALIZE
AGORA!

DentalCAD 3.3 Chemnitz



o **DentalCAD** mais
inteligente de todos os tempos!

DentalCAD® 3.3 Chemnitz leva a eficiência do seu fluxo de trabalho a um novo nível e reúne todas as ferramentas que você sempre quis.

AI Design* agora disponível para coroas múltiplas



Economize tempo e cliques em:

- Até três coroas posteriores adjacentes
- Pontes posteriores com até três elementos

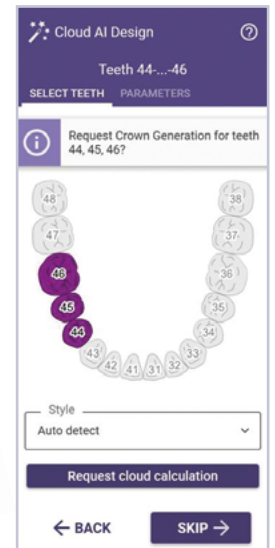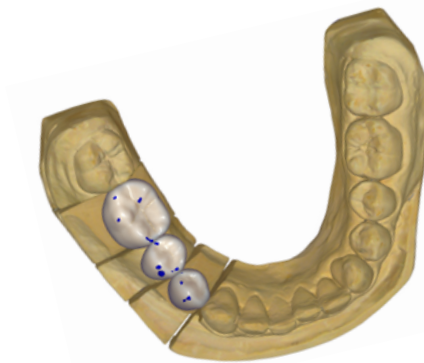


O Implant Module recebe uma grande atualização

- Melhores propostas de pilares, otimizadas automaticamente para a posição do dente
- Edição e personalização mais fáceis
- Salve e reutilize predefinições de formas de pilares personalizados
- Visualização 3D de cada componente de implante na biblioteca

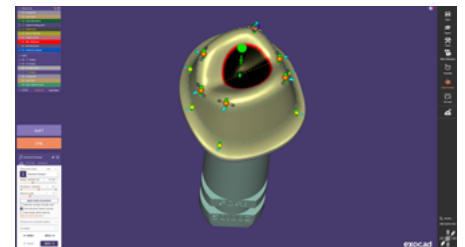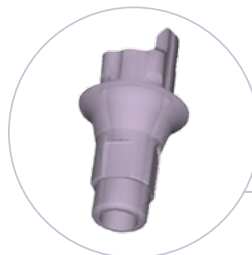


Novo fluxo de trabalho de prótese segmentada, disponível no Bar Module

- O novo fluxo de trabalho de prótese segmentada (híbrida) permite aos usuários **projetar tanto uma barra quanto e sua supraestrutura** em um único e rápido fluxo de trabalho
- O software divide o design em duas partes precisamente ajustadas, **economizando tempo e minimizando ajustes manuais** para protocolos All-on-X

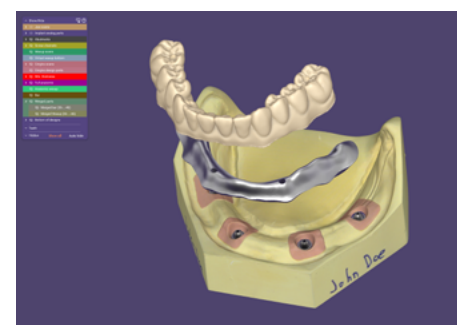

Automação aprimorada baseada em IA no design de placas de mordida

- **Acelere** o design de placas de mordida graças à automação por IA

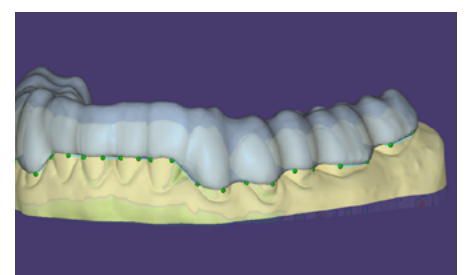


IA aprimorada para design de sorriso

- **Aumente a aceitação de casos** com pré-visualizações fotorealistas de sorriso por IA com *TruSmile™ Photo** e *TruSmile™ Video** baseadas no seu design de sorriso
- Alinhamento automático do escaneamento 3D e da imagem do sorriso do paciente
- Detecção automática da linha do lábio




Morfologia anatômica instantânea agora no modo cadeia

- **Acelere fluxos de trabalho** para pontes e grandes configurações de dentes
- Adaptação sincronizada em tempo real da morfologia oclusal para múltiplas restaurações

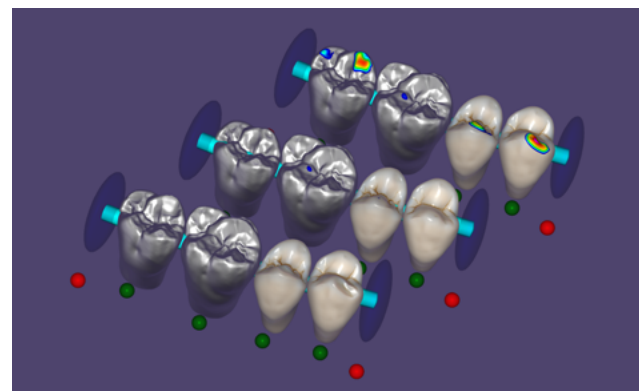


Integração do processo clínico da Ivoclar

- O processo clínico da Ivoclar para próteses digitais agora é suportado pelo *DentalCAD*, visando **reduzir o número de visitas necessárias do paciente**
- O fluxo de trabalho específico da Ivoclar para moldagem funcional e registro de mordida utiliza o *Gnathometer CAD* e o *UTS CAD*

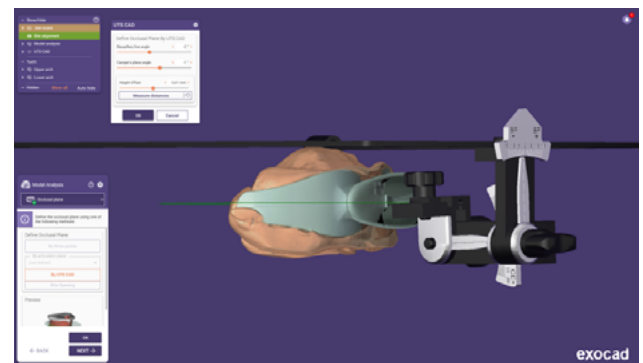

Integração com plataforma cloud DS Core

- **Receba casos** da Dentsply Sirona e outros scanners

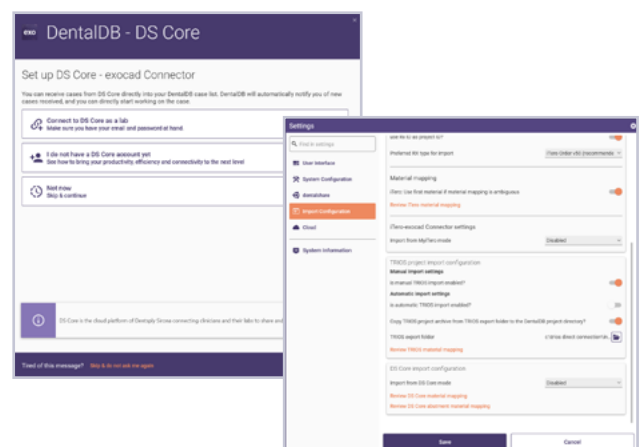


Pesquisa inteligente para menus

- **Encontre recursos instantaneamente** – basta começar a digitar e ir direto para a função que você precisa


Edição simétrica de forma de dentes para design estético

- Crie **sorrisos simétricos de forma eficiente** com formas de dentes estéticas

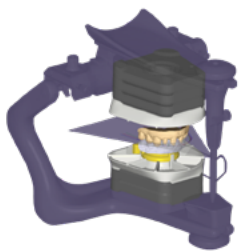



Artex Print&Click novo no Model Creator Module

- Permite **montar modelos impressos** em articuladores Artex sem ferramentas ou gesso

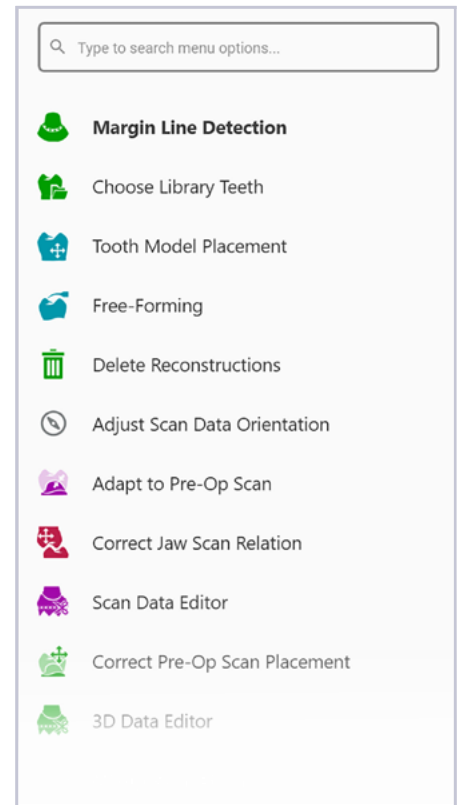

Destaques adicionais

- A ferramenta abrangente de edição de malha agora **suporta cortes triangulares ou cortes limpos** e facilita a **ponte de lacunas** dentro da malha
- Novas **formas de dentes Inspira™** para fluxos de trabalho de coroas e pontes
- **Novo articulador KaVo PROTARevo 7** adicionado, totalizando o número de articuladores suportados para 20

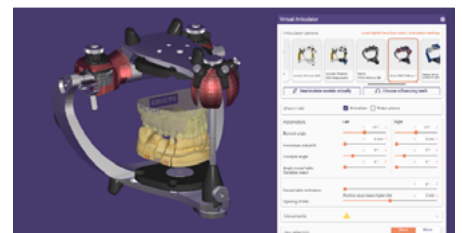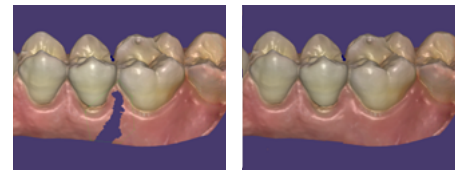

exocad.com/chemnitz

Encontre o seu revendedor exocad aqui: exocad.com/partners

exocad GmbH

Alguns produtos podem não ter sido aprovados/liberados pelas agências regulatórias para venda em todos os mercados. Entre em contato com seu revendedor exocad local para obter informações sobre a atual gama de produtos e sua disponibilidade. A cobertura territorial das marcas registradas está disponível na nossa página web: exocad.com/imprint