


DESIGNEN SIE FORTSCHRITTLICHE TEILPROTHESEN MIT LEICHTIGKEIT

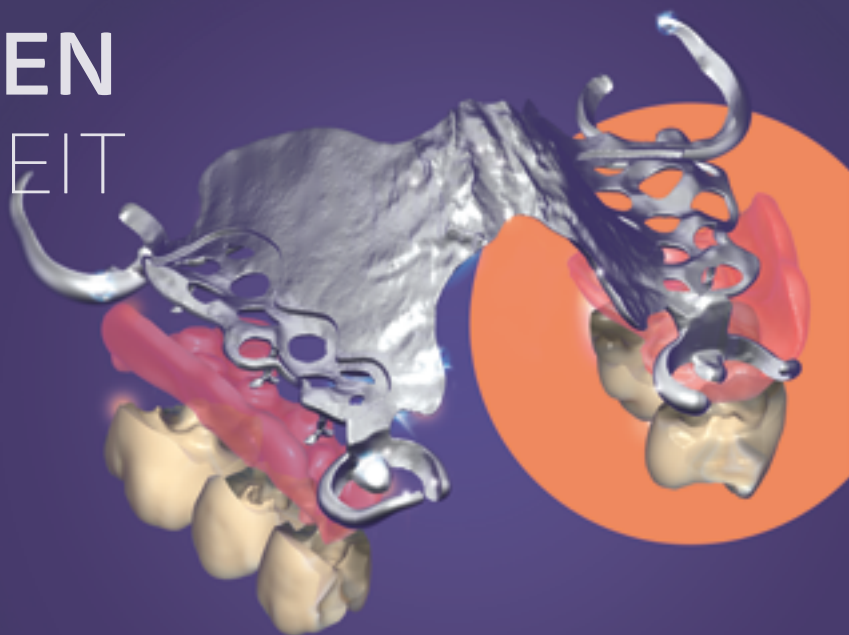

NEUIGKEITEN

PartialCAD 3.1 Rijeka auf einen Blick

PartialCAD 3.1 Rijeka beschleunigt Ihre Workflows mit einer neu gestalteten Benutzeroberfläche, die Sie begeistern wird.

Gehen Sie digital mit allen Komponenten Ihrer Teilprothese


Das zum Patent angemeldete **QuickSnap*** Feature zerlegt die Prothese in ihre Einzelteile und ermöglicht den akkuraten Zusammenbau von gedruckten und gefrästen Bestandteilen durch einfaches Zusammenstecken – das spart Zeit und standardisiert Ihre Workflows.

Zähne, Gingiva oberhalb und unterhalb des Retentionsgitters sowie Gerüste können komplett durch CAD/CAM in den jeweiligen Materialien gefertigt werden.




Intuitivere und schnellere Benutzeroberfläche

- **Passen Sie Ihre Designs effektiv an:** Voreinstellungen ermöglichen die schnelle und einfache Anwendung Ihrer individuellen Design-Einstellungen.
- **Vereinfachte Bearbeitung von Klammern und Stegen:** Stellen Sie die Stärke und Breite jedes Stegs und jeder Klammer einfach mit dem Mausrad ein.
- **Mehr Automatisierung und vereinfachte Bearbeitung:** Das neue Gitterrahmen-Feature erzeugt automatisch einen verstärkten Rahmen um Ihre Retentionsgitter. Die interaktive Bearbeitung von Abschlusskanten ist nun schneller und intuitiver.
- **Jedes Element der Benutzeroberfläche wurde aktualisiert:** Genießen Sie die verbesserte Bedienbarkeit und Lesbarkeit im Stil von *DentalCAD*.

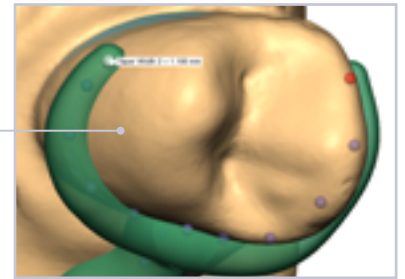


Neue Messwerkzeuge

- **Wachsdimensionen anzeigen:** Erfassen Sie die Dimensionen des gesamten Designs in einer verbesserten Vorschau für die Produktionsplanung und den Druck.
- **Schnittansicht:** Prüfen Sie Designs und nehmen Sie mehrere Messungen der Schichtstärke gleichzeitig vor.

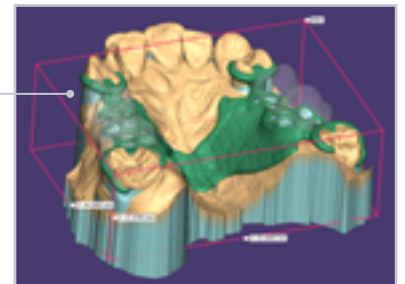

Steuern Sie den Aufbau

- Das Aufbau-Werkzeug bietet neu angeordnete Einstellungen mit individuellen Voreinstellungen und eine animierte Explosionsansicht aller Bestandteile.

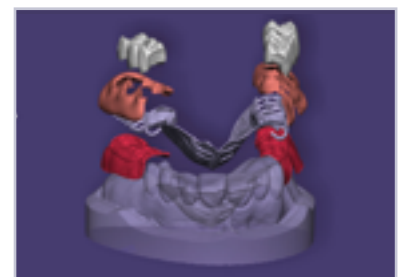

[exocad.com/partialcad-rijeka](https://www.exocad.com/partialcad-rijeka)

Finden Sie hier Ihren exocad Vertriebspartner: [exocad.com/partners](https://www.exocad.com/partners)

exocad GmbH



Einige Produkte sind möglicherweise nicht für den Vertrieb in allen Märkten zugelassen/freigegeben.
Bitte kontaktieren Sie Ihren exocad Händler für weitere Informationen zum aktuellen Produktsortiment und zur Verfügbarkeit.